




TEST DE RECHERCHE DE SANG DANS LES SELLES

MODE D'EMPLOI



Ne pas manger de boudin noir trois jours avant de faire ce test.

Ce test peut être fait pendant un traitement par aspirine et/ou anticoagulants.

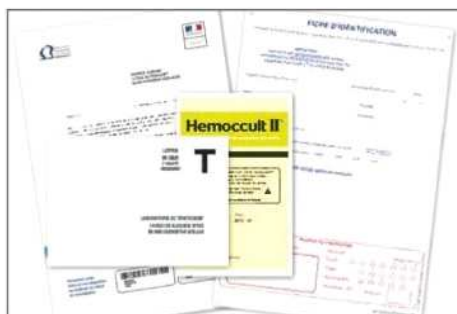

1. Rassemblez la lettre d'invitation sur laquelle se trouvent les étiquettes autocollantes, la pochette de test et l'enveloppe T.



2. En ouvrant le test, vous trouverez une pochette de protection, une plaquette avec trois volets, six bâtonnets et du papier pour recueillir les selles.



3. Commencez par coller l'étiquette se trouvant sur l'invitation, sur la face arrière de la plaquette ou complétez les informations demandées.



4. Utilisez le papier fourni pour le recueil des selles (matières fécales). Placez-le sur la cuvette en le coinçant sous la lunette.




5. Attention : Pour garantir l'efficacité du test, la selle ne doit pas rentrer en contact avec un liquide (eau, urine, javel).



6. Vous pouvez aussi utiliser un récipient propre et sec (sac plastique, cuvette, papier journal, assiette jetable, etc.) pour recueillir les selles.



7. Avec un bâtonnet, prélevez un petit échantillon de selle de la taille d'une lentille ou d'un grain de riz.

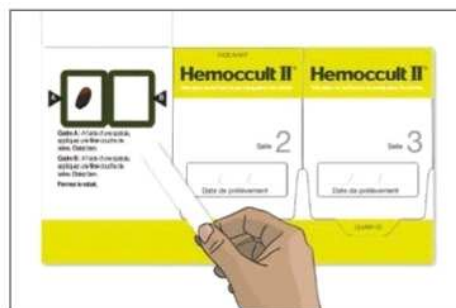


8. Inscrire sur chaque rabat la date de chaque prélèvement.

Soulevez la languette « selle 1 » et déposez l'échantillon sur le cadre A de la plaquette.




9. Avec un autre bâtonnet, prélevez un deuxième échantillon de même taille à un autre endroit de la même selle.

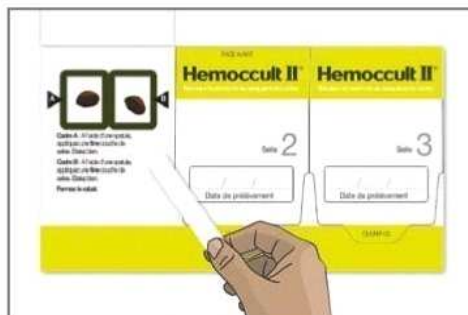

10. Appliquez ce même échantillon sur le cadre B, sous la même languette.



11. Refermez le volet, vérifiez que la date de votre prélèvement soit inscrite et **posez la plaquette dans un endroit sec**. Procédez de la même manière pour les trois selles successives.

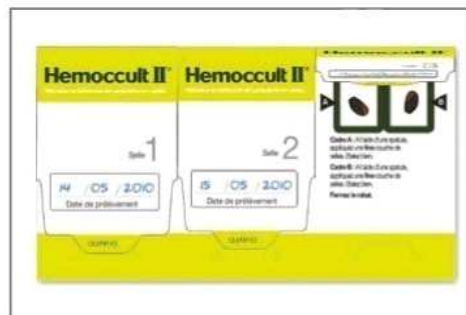

12. Chaque prélèvement doit être effectué avec un nouveau bâtonnet. Si vous allez à la selle en oubliant d'effectuer un prélèvement, vous pouvez faire le prélèvement sur la selle suivante.



13. Glissez la plaquette dans la pochette prévue à cet effet.



14. Placez la pochette fermée et la feuille d'invitation **dans l'enveloppe T bleue** préadressée au laboratoire :

Laboratoire HICHRI
Autorisation N°35282
34051 MONTPELLIER CEDEX 1



15. Postez l'enveloppe sans affranchir.

ATTENTION : un délai de 10 jours maximum doit être respecté entre le premier prélèvement et l'envoi du test.

ATTENTION :
Ne pas envoyer à SKD France
Ni à Gard Lozère Dépistage

Vous recevrez le résultat du laboratoire HICHRI

RESULTAT NEGATIF (97% DES CAS)

Cela signifie qu'aucun saignement n'a été détecté dans les selles.

Vous serez invité à renouveler le test dans les deux ans.

Mais il arrive que certains polypes ou cancers ne soient pas détectés par le test s'ils ne saignent pas au moment des prélèvements.

Donc, si des troubles digestifs apparaissent (présence de sang dans les selles, modification soudaine de transit, douleurs abdominales persistantes) consultez votre médecin sans attendre la nouvelle invitation.

RESULTAT POSITIF (3% DES CAS)

Cela ne signifie pas que vous avez un cancer mais que du sang a été détecté dans vos selles.

Pour en identifier l'origine, votre médecin vous prescrira une coloscopie réalisée par un gastroentérologue.